

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ, ПЛЕЧ, ЖИВОТА
И ПОЯСНИЦЫ ШИАЦУ С ПОДОГРЕВОМ

Модель: MGS-150DC

При использовании данного продукта должны соблюдаться все перечисленные ниже инструкции и меры предосторожности без исключения.

Предупреждение об опасности:

Во избежание риска поражения электрическим током всегда отключайте устройство от сети после использования и перед чисткой.

Внимание!

Для снижения риска ожогов, травм, поражения электрическим током или пожара, соблюдайте следующие требования:

1. Не оставляйте включенный массажер без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не используется, а также перед очисткой, установкой, снятием деталей.
2. Не используйте устройство под одеялом или подушкой во избежание перегрева, пожара и поражения электрическим током.
3. Не переносите устройство за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
4. Не пользуйтесь устройством с засоренными вентиляционными отверстиями. Не допускайте попадания в эти отверстия волос, шерсти и т.д.
5. Не вставляйте и не роняйте посторонние предметы в отверстия устройства.
6. Не пользуйтесь массажером вне помещения.
7. Не используйте устройство вблизи открытых источников газа, кислорода или в местах использования аэрозольных спреев.
8. Для окончания работы с устройством отключите все элементы управления и выньте вилку из розетки.
9. Не оставляйте устройство без присмотра при использовании детьми, недееспособными людьми или людьми с ограниченными возможностями.
10. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей, чтобы избежать ожогов. Не используйте массажер на участках кожи с низкой чувствительностью или плохим кровообращением.
11. Массажер оснащен нагревающимися элементами. Лицам с низкой чувствительностью к высокой температуре следует использовать его с осторожностью.
12. Прибор должен использоваться только при низком безопасном напряжении в соответствии с маркировкой.

13. Используйте устройство только с сетевым адаптером из комплекта.
14. Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющие опыта и знаний, включая детей. Использование возможно только после инструктажа и под присмотром ответственного лица.
15. Уделяйте особое внимание деталям устройства, наиболее подверженным износу. Неисправные детали рекомендуется заменить немедленно и не использовать устройство до ремонта.
16. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с данной инструкцией.
17. Не используйте устройство, если у него поврежден шнур или вилка, если оно не работает должным образом, если оно упало и было повреждено, или если оно упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.



Устройство не предназначено для использования в коммерческих или медицинских целях. Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта.



Используйте только в помещении!



Не используйте устройство во влажных помещениях (например, когда принимаете душ или ванну)

Не мойте водой!

Не отдавайте в химчистку!




После использования в течении 15 минут необходимо отключить устройство не меньше, чем на 30 минут. Затем можно использовать повторно.

Сохраните эту инструкцию

Массажные зоны



Спина

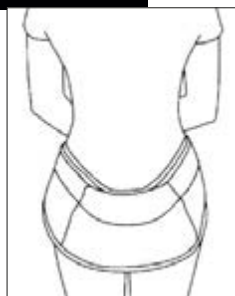

Бедра



Ноги




Шея



Плечи

Внешний вид устройства

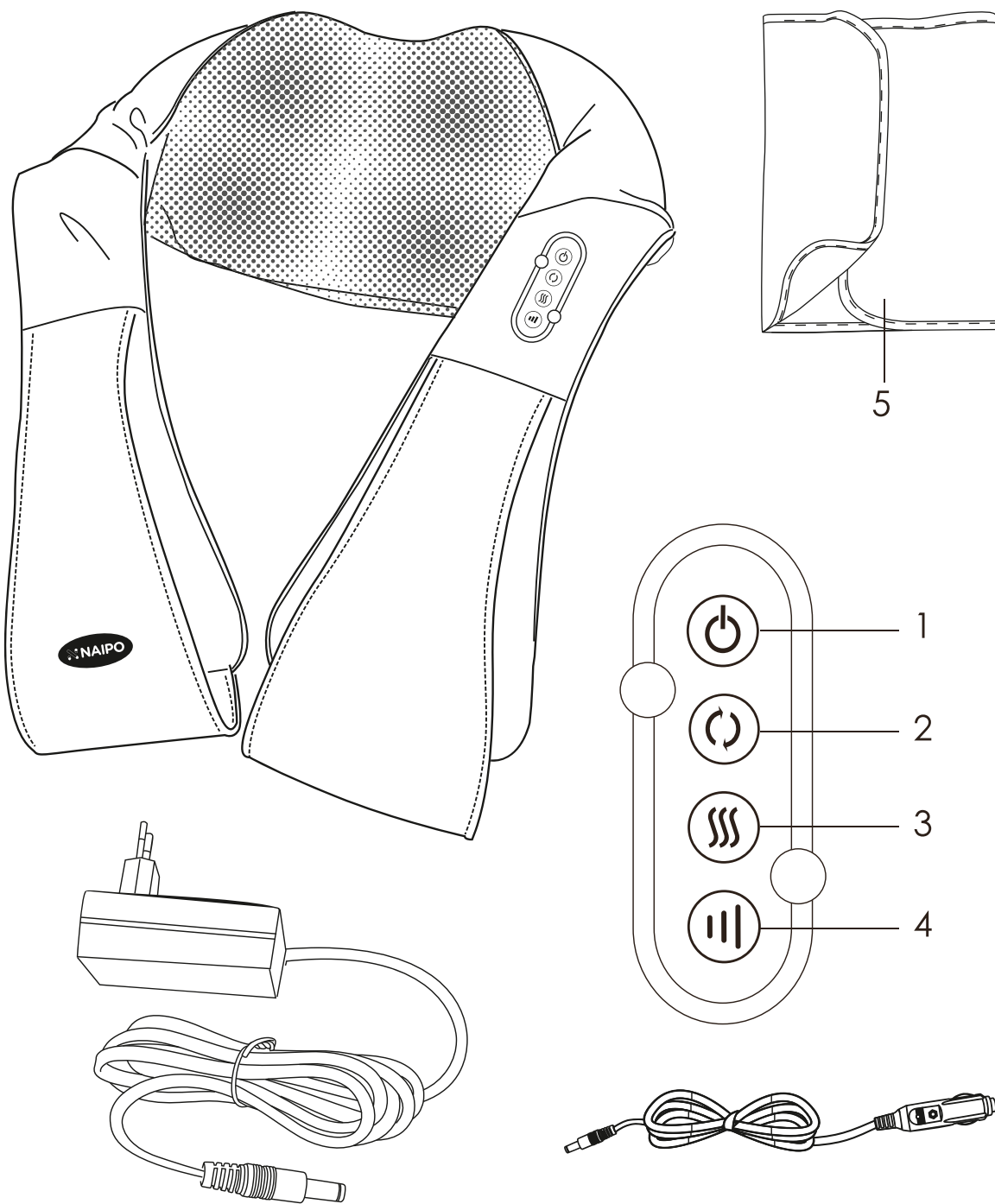

1. Кнопка питания
2. Кнопка регулировки направления массажа
3. Кнопка нагрева
4. Кнопка изменения скорости массажа (средняя / высокая / низкая)
5. Противопылевая ткань

Инструкция по применению

1. Подключите сетевой адаптер к розетке
2. Нажмите кнопку питания, чтобы начать массаж. Функции вращения роликов и подогрева будут активированы автоматически.
3. Нажмите на кнопку подогрева, чтобы включить или отключить эту функцию.
4. Нажмите на кнопку регулировки направления массажа, чтобы изменить его.
5. Нажмите кнопку изменения скорости массажа, чтобы выбрать низкую, среднюю или высокую интенсивность.

Чистка и хранение

- Перед чисткой убедитесь, что устройство было выключено, а сетевой адаптер был отключен от розетки.
- Используйте для чистки сухую мягкую ткань.
- Содержите устройство в чистоте и храните в безопасном месте. Держите подальше от мест с повышенной влажностью или температурой.

Важно!

Не используйте при чистке бензин, растворитель и другие агрессивные химические вещества. В противном случае поверхность устройства будет испорчена и потеряет первоначальный вид.

Технические характеристики:

Название:	Массажер для шеи, плеч, живота и поясницы шиацу с подогревом Naipo
Модель:	MGS-150DC
Напряжение и ток:	DC 12 В 2.5 А
Номинальная мощность	30 Вт

Производитель: Aukey International Limited., No. 102,
Building P09, China South City, Pinghu Town, Longgang
District, Shenzhen, Китай

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил»
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37
Гарантия: 24 месяца с момента покупки
Срок службы: 24 месяца

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 5
Телефон: +375 (29) 761 60 65
Понедельник – выходной
Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда



Устройство соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза.



Гарантия и поддержка клиентов. По вопросам
поддержки или гарантийных претензий,
пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному
выше адресу.