

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед использованием удостоверьтесь, что батарея заряжена, зарядите при разряженной батарее. Наденьте одну из 7 массажных насадок. Нажмите на кнопку включения. Выберите режим массажа. Отрегулируйте интенсивность массажа при помощи кнопок. Для того, чтобы продлить срок эксплуатации массажера, используйте его в течение 15 минут, потом делайте перерыв. Массажер отключается автоматически через 15 минут работы. После использования отключите массажер и выньте вилку из сети.

**BRADEx™**  
Health & Beauty

**Материал:** АВС-пластик, металл, германий, нефрит.  
**Цвет:** чёрный, серебристый  
**Мощность:** 16 Вт  
**Номинальное напряжение:** 8.4 В  
**Частота:** 50 Гц  
**Комплектация:** массажер – 1 шт, сменные массажные насадки – 7 шт, сетевой адаптер – 1 шт, инструкция.

#### ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство издает шум во время работы	шум – это результат механической работы массажера	-
Устройство не работает	разряжен аккумулятор автоматическое отключение через 15 минут работы	зарядите аккумулятор включите массажер повторно после перерыва

**BRADEx™**  
Health & Beauty

#### МАССАЖЁР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ С ДИСПЛЕЕМ И 7 СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
KZ 0567

Беспроводной смарт-массажер для тела со сменными насадками, несколькими режимами массажа и регулируемой интенсивности способствует снятию напряжения, боли в мышцах, усталости, улучшению кровообращения и внешнего вида кожи, а также придает тонус и заряд бодрости на весь день. Общий, тонизирующий, расслабляющий, интенсивный, глубокий и антицеллюлитный виды массажа стали возможны при помощи всего лишь одного универсального беспроводного массажера. Портативный массажер оснащен встроенным аккумулятором и зарядным устройством, что позволяет использовать его без доступа к сети в офисе, в машине, на даче и т.д. Тщательно продуманная конструкция с длинной ручкой гарантирует удобство самостоятельного использования на труднодоступных участках шеи, спины, ягодиц и бедер.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективный вибрационный массаж
- Регулировка массажа:
- 5 режимов
- 6 скоростей
- 7 насадок
- Таймер выключения – 15 мин.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Нельзя использовать:  
- на поврежденных участках тела,  
- проблемах с сердцем,  
- травмах,  
- при беременности и кормлении грудью,  
- при менструации,  
- после еды,

- под мышками, под коленями, на внутренней стороне верхней части бедра и в паху, вдоль линии позвоночника.  
- при диабете, флебите, варикозном расширении вен, тромбозе, новообразованиях, воспалительных процессах, эпилепсии, остеопорозе, воспалениях, травмах.  
О других возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.
- Храните в сухом прохладном месте.
- Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Используйте после еды не раньше, чем через час.
- Храните вдали от детей.
- Не используйте на одном участке тела больше 15 минут.
- Не использовать при контакте с водой.
- Не погружайте массажер в воду.
- Избегайте попадания воды и других жидкостей внутрь массажера.
- При поломке массажера отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- Не использовать при недомогании.
- Отключите массажер перед тем, как менять насадку.
- Не использовать при повреждении шнура зарядного устройства.
- Не позволяйте детям пользоваться массажером без присмотра взрослых.
- Массажер не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими или умственными способностями.
- Не использовать массажер без предварительного ознакомления с инструкцией.

#### РАНЕНИЕ И УХОД:

После использования выключите массажер, отключите от сети, очистите при необходимости при помощи влажной салфетки, храните в сухом прохладном месте.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:


Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

#### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:



- **КРУГЛАЯ НАСАДКА**  
общий расслабляющий, декомпрессионный, массаж для подтяжки кожи, массаж живота
- **БОЛЬШАЯ ТОЧЕЧНАЯ НАСАДКА**  
тонизирующий массаж
- **ТУРБИНАЯ МАССАЖНАЯ НАСАДКА**  
глубокий массаж
- **МАЛАЯ ТОЧЕЧНАЯ НАСАДКА**  
акупунктурный массаж небольших зон
- **ЗУБЧАТАЯ (РИФЛЕНАЯ/АКУПУНКТУРНАЯ) МАССАЖНАЯ НАСАДКА**  
разминающий массаж
- **ГЕРМАНИЕВАЯ МАССАЖНАЯ НАСАДКА**  
оздоровительный, расслабляющий массаж. Германий способствует омоложению и подтяжке кожи, а также улучшению тонуса мышц и снятию отеков.
- **НЕФРИТОВАЯ МАССАЖНАЯ НАСАДКА**  
глубокая проработка мышц, глубокий разминающий и антицеллюлитный массаж. Нефрит способствует улучшению тонуса кожи и лимфодренажному эффекту.

Массажные насадки подходят для массажа разных частей тела: шеи, спины, рук, талии, бедер, голеней, стоп.

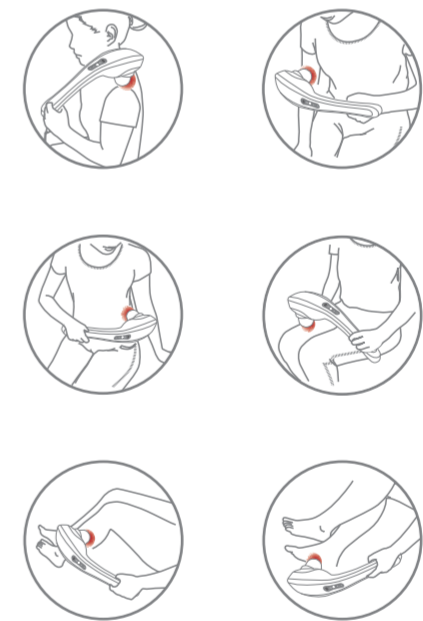

KZ 0570  
МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ  
С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА ГУША  
«ASIA SPA»

KZ 0569  
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ТАЙСКОГО МАССАЖА  
«СЕН СИП»

KZ 0571  
МАССАЖНАЯ  
НАКИДКА  
С ПОДОГРЕВОМ

KZ 0556  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0568  
МАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА  
БЕСПРОВОДНОЙ  
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙ ЧИ  
И ШИАЦУ МАССАЖА

KZ 0561  
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА  
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»