
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
SA-5561W




Технология чистки: звуковая
38 000 колебаний в минуту
2 насадки в комплекте

5 режимов работы
100% удаляет налет
USB зарядка

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником дома и в дороге. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

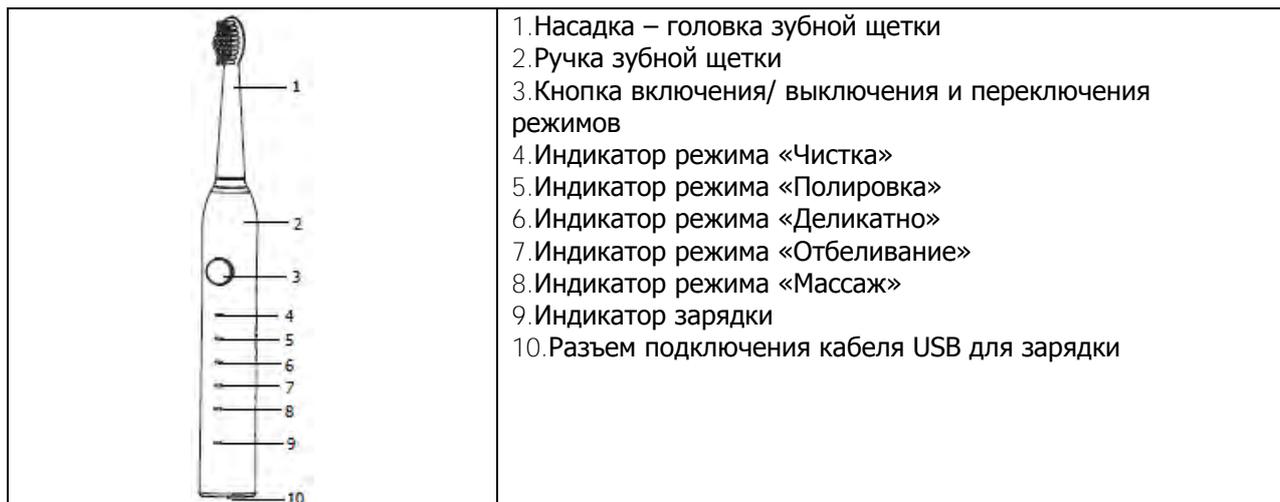

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрическая зубная щетка предназначена для удаления зубного налета и остатков пищи с зубов с целью снижения риска образования кариеса и улучшения здоровья зубов и полости рта.

Прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

Данный прибор не предназначен для детей до 6 лет. Дети от 6 до 14 лет и лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом могут использовать зубную щетку под контролем лиц, отвечающих за их общую безопасность, либо после инструктирования по вопросам использования и мерам безопасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед первым использованием зубной щетки.

• В случае если Вы проходите стоматологическое лечение, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом-стоматологом перед началом использования.

Внимание: при первом использовании может ощущаться зуд или наблюдаться слабое кровотечение. Это связано с тем, что ваши десна еще не привыкли к настолько эффективной чистке. Рекомендуется первое время использовать режим работы «Деликатно». Как правило, через 1-2 недели эти симптомы исчезают. Если они не исчезнут через 2 недели, прекратите использование прибора и обратитесь к стоматологу.

Предупреждение:

• Пользователи, которым установлен внутри челюстной зубной имплантат или которые получают стоматологическую помощь по лечению зубов, деформации зубов и челюстей, должны пользоваться изделием с учетом рекомендаций стоматолога.

• Зубная щетка Sakura соответствует стандартам безопасности для электромагнитных устройств.

В случае появления сомнений по поводу кардиостимулятора или других имплантированных устройств, проконсультируйтесь с врачом перед первым использованием прибора.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- Держите розетку и зарядное устройство вдали от воды.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Проверьте зарядный шнур на предмет повреждений перед первым использованием и в дальнейшем использовании прибора.
- Не используйте прибор в душе или во время ваннных процедур.
- Не располагайте и не храните прибор вблизи от воды находящейся в ванной, раковине, и т.д.
- Убедитесь в том, что зарядное устройство полностью сухое, перед тем как включать его в источник питания.
- Не включайте прибор в электросеть с напряжением не соответствующим указанному на приборе

или на зарядном устройстве. Вы можете повредить их.

- Не используйте прибор, если его шнур или зарядное устройство повреждено, если прибор работает неправильно, если прибор упал или повредился или упал в жидкость.
- В случае поломки обратитесь в сервисный центр официального дистрибьютора. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
- Держите провода вдали от горячих поверхностей.

Примечание:

- Данное изделие предназначено для чистки зубов, десен и языка. Используйте его строго по назначению. При возникновении боли и дискомфорта немедленно прекратите использование зубной щетки и обратитесь к врачу.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины.
- Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми, а также острые предметы, которые могут поранить ребенка.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Для зарядки аккумулятора необходимо прибор подключить в электросеть к устройству или блоку питания с USB разъемом – адаптеру (5V, 1A) посредством кабеля, входящего в комплект.

Заряжайте прибор при температуре от 15 до 35 °C.

1. Аккуратно вставьте один штекер кабеля, входящего в комплект в разъем для зарядки (10), второй штекер подсоедините к адаптеру.
2. Аккуратно вставьте адаптер в розетку.
3. Если прибор разряжен, то при подключении зарядки индикатор зарядки будет гореть красным. Время полной зарядки аккумулятора составляет 1,5-2 часа, в зависимости от источника питания. По завершении зарядки индикатор загорится зеленым светом.

Внимание: если вы не использовали прибор более 6 месяцев, оставьте его заряжаться минимум на 12 часов. После такой полной зарядки прибор может работать до 45 дней при условии ежедневного использования (2 раза в день по 2 минуты).

Во время зарядки запрещается пользоваться прибором!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Прикрепите головку зубной щетки к ручке зубной щетки.
- Смочите головку щетки и нанесите на нее зубную пасту. Вы можете пользоваться любым типом зубной пасты. Чтобы избежать разбрызгивания, поднесите головку зубной щетки к зубам в полости рта, затем включите ее с помощью кнопки включения (3).
- Начните чистить зубы выметающими движениями от линии десен до режущего края зуба. Следите за тем, чтобы щетинки чистящей головки располагались под углом 45° к линии десен. Сначала очистите внешние поверхности зубов, затем внутренние и закончите чисткой жевательных поверхностей зубов.
- С помощью кнопки включения/выключения (3) Вы можете переключать режимы очистки во время работы зубной щетки.
- Чистка зубов длится не менее 2-х минут – по 30 секунд на квадрант. Короткая пауза в работе щетки укажет, когда нужно переходить к следующему участку. Если работу щетки не приостановить, то через 2 минуты работы она автоматически отключится.

Режимы чистки

1. Режим «Чистка» - обеспечивает эффективное удаление налета для правильной ежедневной гигиены полости рта и ухода за зубами и деснами.
2. Режим «Полировка» - комбинированный режим с автоматическим переключением скорости колебаний щетинок для очистки от чайного, кофейного и других типов налета, а также для придания дополнительного блеска эмали.
3. Режим «Деликатно» - подходит для пользователей, которые имеют проблему кровоточивости десен, стоматит, удаленные зубы, зубные имплантаты, брекеты.
4. Режим «Отбеливание» - применяется для очистки стойкого налета от чая, кофе, сигарет.
5. Режим «Массаж» - эффективное очищение и массаж десен.

Примечание: Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку (сменную насадку) каждые 3 месяца. Если щетинки изнашиваются до истечения данного срока, необходимо заменить сменную насадку и снизить давление на зубы и десны при чистке зубов.

ОЧИСТКА И УХОД

- После использования выключите зубную щетку, снимите головку зубной щетки, промойте ее под водой и просушите.
- Ручку зубной щетки очистите с помощью полотенца или мягкой ткани.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных на сайте www.sakura-dt.com
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку, настройку изделия у владельца и не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации;
 - при попадании внутрь прибора воды, посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.

Срок службы прибора: 2 года.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сменная головка зубной щетки	2 шт.
2. Ручка зубной щетки	1 шт.
3. USB кабель для зарядки	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота пульсации: 38000 импульсов в минуту
Тип аккумулятора: Li-ion 500 мАч
Время работы аккумулятора: до 45 дней
Номинальная мощность: 1,8 Вт
Номинальное напряжение: 3,7 В, 0,55 А
Время зарядки аккумулятора: 2 часа
Автоотключение: через 2 минуты работы
Степень пылевлагозащиты: IPX7
Условия хранения: от -10°C до +40°C
Размеры в индивидуальной упаковке: 83*38*230 мм

Производитель: NINGBO LEXON BEARING CO.,LTD

Адрес: Rm 2210, Shinger Mansion, No.1277, Kaifa Road, Gutang Street, Cixi City, Ningbo, Китай

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а.

Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30, www.sakura-dt.com

№ партии: ZQ21001
Дата изготовления: 06/2021
Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П.

_____ / _____ /

(подпись продавца)

(расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

_____ / _____ /

(подпись покупателя)

(расшифровка подписи)

Сведения о ремонте

№	Дата	Код Работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял, подпись заказчика