

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Электрическая зубная щетка CS Medica CS-485 (с зарядным устройством)



Благодарим Вас за приобретение зубной щетки CS-485.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.

Предупреждение! Следующие ситуации являются потенциально опасными и, если их не предотвратить, могут привести к серьезной травме:

- Используйте прибор только по прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Не размещайте и не храните прибор в местах, откуда он может легко упасть в ванну или раковину.
- Не погружайте прибор в воду или иную жидкость.
- Не пытайтесь достать зарядное устройство, если оно упало в воду или другую жидкость. Немедленно отсоедините его от сети, если это безопасно.
- Данный прибор не является игрушкой. Не разрешайте детям играть с прибором. Не допускается использование прибора детьми в отсутствие взрослых.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми.
- Не допускайте обматывания USB-кабеля вокруг каких-либо частей тела, это может привести к травме или удушению.
- Дети должны использовать зубную щетку под присмотром взрослых. Рекомендованный возраст для пользования данной зубной щеткой – от 12 лет.
- Данный прибор не предназначен для самостоятельного использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.
- Не подключайте зарядное устройство к сети мокрыми руками.
- Подключайте устройство к электрической сети с требуемыми параметрами.
- Не допускайте попадания воды на зарядное устройство и USB-кабель.
- Не используйте USB-кабель с поврежденным проводом или разъемом. Не пользуйтесь разболтанным гнездом питания.

Общие меры предосторожности

- Обращайтесь с зубной щеткой и зарядным устройством аккуратно. Не роняйте их и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.
- Храните устройство вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Не храните устройство в местах, подверженных сильным ударам или вибрации (например, в местах, где устройство легко может упасть на пол).
- Не используйте зарядные устройства, не предназначенные для зарядки данной зубной щетки.
- Не повреждайте и не обрывайте USB-кабель.
- Не вносите изменения в конструкцию USB-кабеля.
- Не кладите тяжелые предметы на USB-кабель.
- Не пытайтесь зарядить устройство, если USB-кабель поврежден.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Перед каждым использованием осматривайте прибор и его компоненты на предмет наличия повреждений. В случае обнаружения неисправностей или повреждений не пользуйтесь изделием и обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции торговой марки CS Medica, адреса которых указаны в настоящем руководстве.

Предосторожности медицинского характера


- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеприведенного:
 - чувствительные зубы или десны;
 - недавно перенесенная периодонтальная или стоматологическая хирургическая операция;
 - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой, а также в случае возникновения боли или дискомфорта во время использования щетки.
- Проконсультируйтесь с врачом, если у Вас установлен электрокардиостимулятор.
- Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте для удаления пятен от табака или отбеливания зубов, могут серьезно повредить эмаль в случае их продолжительного использования. Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед тем, как начать использование зубных паст с повышенным содержанием абразивных веществ совместно с электрической зубной щеткой.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный прибор предназначен для ухода за полостью рта взрослых и детей от 12 лет.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Ниже приведены основные составные части прибора:

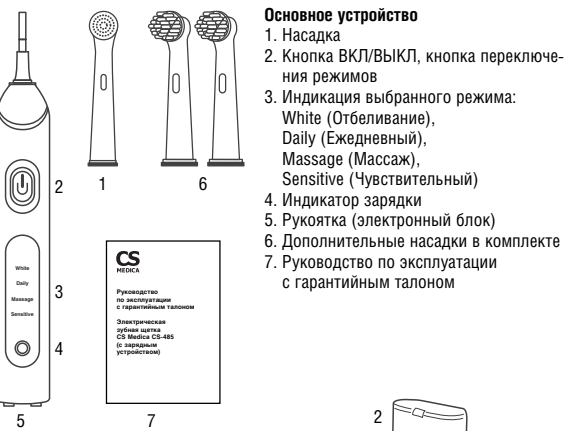

- Основное устройство**
- Насадка
 - Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, кнопка переключения режимов
 - Индикация выбранного режима: White (Отбеливание), Daily (Ежедневный), Massage (Массаж), Sensitive (Чувствительный)
 - Индикатор заряда
 - Ручка (электронный блок)
 - Дополнительные насадки в комплекте
 - Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

Зарядное устройство

- Гнездо для основного устройства
- Крышка отсека для хранения насадок
- Гнездо для насадок
- USB-кабель
- Адаптер



Дополнительно можно приобрести:

Насадки CS Medica RP-85 для электрической зубной щетки CS Medica CS-485 (в комплекте 2 насадки).

4. РЕЖИМЫ ЧИСТКИ

CS-485 представляет собой электрическую зубную щетку ротационного типа – компактная круглая головка щетки совершает около 8000 возвратно-вращательные движений в минуту, очищая и полируя поверхность каждого зуба и обеспечивая качественный уход за полостью рта, сопоставимый с профессиональной чисткой в кресле стоматолога.

При первом использовании устройство запускается в режиме «White»/«Отбеливание», установленном по умолчанию. Впоследствии при очередном включении всегда активируется последний использованный режим. Вы можете выбрать один из четырех режимов чистки последовательным нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ в течение пяти секунд после включения щетки – на панели ручки загорится индикатор, соответствующий выбранному режиму.

Четыре режима чистки, вкупе с прилагаемыми в комплекте насадками, обеспечат качественный уход за полостью рта в соответствии с Вашими потребностями:

1. Режим «White» («Отбеливание»)

Рекомендуется для особо тщательного удаления налета и пятен (например, от кофе или табака) с эмали для возврата естественной близины Вашим зубам. Не рекомендуется людям с повышенной чувствительностью эмали, а также болезнями десен.

2. Режим «Daily» («Ежедневный»)

Рекомендуется для ежедневного использования.

3. Режим «Massage» («Массаж»)

Рекомендуется для профилактического массажа десен, а также пациентам с чувствительными деснами.


4. Режим «Sensitive» («Чувствительный»)

Идеально подходит для чувствительных зубов и десен, а также для пациентов с брекет-системами. Также данный режим подойдет тем, кто только начинает пользоваться электрической зубной щеткой, для облегчения привыкания к ней.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Управление одной кнопкой

Управление функциями прибора осуществляется при помощи одной кнопки, что делает использование прибора простым и интуитивно понятным для пользователя. Нажмите кнопку, чтобы включить питание щетки. Нажмите кнопку снова, чтобы выбрать один из четырех режимов чистки. Щетка автоматически выключится через 2 минуты работы. Также Вы можете в любой момент отключить питание прибора сами, нажав на кнопку спустя 5 секунд после включения или выбора режима.

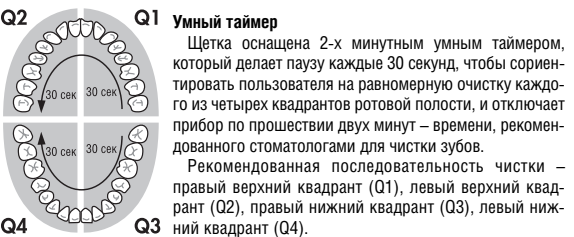

Подзарядка бесконтактным способом

Современное зарядное устройство индукционного типа существенно облегчит использование зубной щетки и ее подзарядку, сделает этот процесс более комфортным и эффективным. Просто установите ручку в соответствующее гнездо зарядного устройства, подключенного к сети либо USB-разъему компьютера.

Компактное зарядное устройство

CS-485 снабжена компактным зарядным устройством, которое легко помещается в любой ванной комнате. В зарядном устройстве предусмотрен закрытый отсек для хранения двух дополнительных насадок.

Встроенная память

CS-485 запоминает последний используемый режим и при очередном включении начнет работу с этого режима.

Увеличенный срок службы аккумулятора

Питание CS-485 обеспечивает энергоемкий литий-ионный аккумулятор. Время работы щетки после полной подзарядки составит около 2 недель (при условии использования два раза в день по две минуты).

6. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ


ПОДЗАРЯДКА

Особенностью CS-485 является возможность его подзарядки через USB-разъем или с помощью сетевого адаптера.

- Поставьте зарядное устройство на ровную сухую поверхность.
- Выберите один из следующих вариантов подзарядки:
 - От электросети 220 В. Соедините USB-кабель с адаптером переменного тока. Вставьте вилку в электрическую розетку.
 - От компьютера. Подсоедините USB-кабель к USB-разъему компьютера.
- Установите зубную щетку в гнездо для основного устройства. Начнется зарядка, на что укажет загоревшийся красным цветом индикатор заряда. После того, как зубная щетка будет полностью заряжена, цвет индикатора заряда сменится на зеленый.

Внимание: используйте только адаптер, поставляемый в комплекте с данным прибором, в противном случае возможна поломка прибора, а также риск возгорания.

- Примечания:**
- После приобретения зубной щетки сразу же зарядите ее до максимального уровня (без перерывов). Общее время полной зарядки составляет примерно 10 часов.
 - В процессе зарядки ручка (электронный блок) и зарядное устройство могут немного нагреваться.
 - Во время зарядки зубной щетки кнопка ВКЛ/ВЫКЛ не работает.

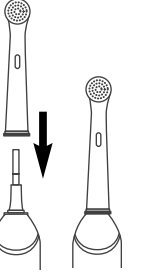

УСТАНОВКА НАСАДКИ

Установите насадку на металлический стержень ручки. Прижмите насадку до упора. Между корпусом щетки и насадкой не должно быть зазора.



7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Смочите щетину водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого поместите щетку в ротовую полость.

Примечание:

Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.

- Расположите щетинки насадки под углом 45 градусов по отношению к линии десны.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить питание щетки.
- Выберите один из 4 режимов последовательным нажатием кнопки переключения режимов в течение 5 секунд после включения щетки.
- Аккуратно касаясь зубов и десен щетинками, медленно перемещайте головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, совершая легкие круговые движения и задерживаясь по несколько секунд на поверхности каждого зуба, захватывая межзубную промежутки и десны, для наилучшей очистки и массажного воздействия.
- Данная щетка оснащена функцией умного таймера, который будет совершать паузу каждые 30 секунд чистки, что позволит пользователю концентрироваться на чистке каждого из 4-х условных квадрантов ротовой полости в течение 30 секунд. Не забывайте очищать все поверхности зуба, включая окклюзионную, вестибулярную и язычную.
- Завершив чистку зубов, не вынимая щетку изо рта, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить зубную щетку.
- Зубная щетка автоматически выключится по прошествии двух минут – времени, рекомендованного стоматологами для чистки.
- Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.
- Протрите ручку мягкой сухой тканью перед тем, как установить ее в гнездо зарядного устройства.
- Установите ручку в гнездо зарядного устройства, а насадки в отсек для хранения насадок.

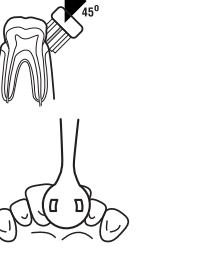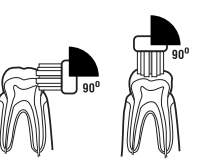

Примечание:

В начале пользования электрической зубной щеткой Вы можете испытывать ощущение щекотки или покалывания, вызываемое движением щетинок. Со временем, по мере привыкания к зубной щетке, это ощущение пройдет. Для облегчения привыкания к электрической зубной щетке первые несколько чисток рекомендуется пользоваться режимом «Sensitive».

8. ОЧИСТКА

Внимание: Категорически запрещается мыть прибор или его компоненты в посудомоечной машине.

Очистка насадок

- Снимите насадку с ручки.
- Промойте насадку проточной водой. Стряхните излишек воды. Допускается периодическое выдерживание насадки в специальных очищающих растворах для зубных протезов.
- Ежедневно промывайте основание насадки теплой водой.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

Очистка ручки (электронного блока) и зарядного устройства

- Отсоедините питание прибора.
- Не погружайте зарядное устройство, шнур и USB-разъем, а также адаптер в воду или иную жидкость.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Срок гарантии:
Ручка (электронный блок) – 2 года
Насадка – 3 месяца
Адаптер – 2 года**

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « _____ » _____ г.

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

- Снимите насадку и промойте стержень ручки теплой водой.
- Периодически очищайте ручку и зарядное устройство мягкой слегка влажной тканью или бумажным полотенцем.
- Насухо вытрите ручку, прежде чем устанавливать ее на зарядное устройство и подсоединять к электрической сети.
- Не наматывайте шнур на зарядное устройство.

9. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- В зарядном устройстве щетки предусмотрен отсек для хранения двух насадок.
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Храните устройство вдали от огня и прямых солнечных лучей.
- Если прибор не предполагается использовать в течение продолжительного времени, отсоедините зарядное устройство от сети, произведите очистку в соответствии с пунктом «Очистка» данного руководства и уберите прибор на хранение в прохладное сухое место.
- Не кладите тяжелые предметы на прибор во время транспортировки.
- Соблюдайте условия хранения и транспортировки, указанные в разделе 11 данного руководства.

10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Симптом | Возможная причина | Способ решения |
|---|--|---|
| Зубная щетка не работает. | Вы только что приобрели прибор или не использовали его в течение нескольких месяцев. | Зарядите батарею с помощью зарядного устройства в течение не менее 10 часов. |
| Вращения головки слишком медленные и слабые. | Вы слишком сильно прижимаете щетину к поверхности зубов. | Во время чистки слегка касайтесь щетиной поверхности зубов. |
| Прибор работает непродолжительное время даже после полной подзарядки. | 1) Батарея исчерпала свой ресурс. 2) Прибор заряжался недостаточно продолжительное время. | Обратитесь в центр технического обслуживания продукции торговой марки CS Medica. Зарядите батарею с помощью зарядного устройства в течение не менее 10 часов. |

| |
|--|
| Дата обращения « _____ » _____ г. |
| Заклучение мастера, выполненные работы _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____ |
| « _____ » _____ г. |
| _____ |
| Подпись или штамп мастера _____ |
| _____ |
| Работу принял _____ (подпись клиента) |

| | |
|-------------|--|
| EAC | Знак обращения продукции на рынке Таможенного Союза |
| | Обратитесь к руководству по эксплуатации |
| IPXX | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой |
| CE | Знак соответствия директиве ЕС |
| | Изделие класса II. Защита от поражения электрическим током. |
| | «Проверенная безопасность». Немецкая система добровольной сертификации. Центр испытаний Интертэк |
| V | Уровень эффе́ктивности энергопотребления |
| | Прибор выполнен в соответствии с европейской директивой, ограничивающей содержание вредных веществ для обеспечения защиты здоровья людей и окружающей среды. |
| | Температурный диапазон/ Диапазон влажности/ Ограничение атмосферного давления |
| | Для использования только внутри помещений |
| S/N | Серийный номер |
| | Трансформатор безопасного напряжения устойчивый к короткому замыканию |
| | Импульсный источник питания |
| | Надлежащая утилизация прибора (отработанное электрическое и электронное оборудование) |

| Символ | Расшифровка |
|---------------|--|
| | Возможность утилизации использованной упаковки XX – цифровое обозначение материала упаковки YYYYY – буквенное обозначение материала упаковки |
| 1 | Полиэтилентерфталат |
| 20 | Картон |
| 22 | Бумага |
| PAP | Бумага |
| PET | Полиэтилентерфталат |

13. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который расположен на рукоятке щетки и на зарядном устройстве и имеет структуру YYMMNNNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNNNN – порядковый номер изделия.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, разделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.


15. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Сертификат соответствия № RU C-CN.AЖ40.B.00182/19 от 26.04.2019 г. Срок действия до 25.04.2022
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Адреса региональных торговых представительств и центров технического обслуживания продукции торговой марки CS Medica в России

Адрес и телефон Центра технического обслуживания в Москве:
ООО «СиЭс Медика ТехЭксперт»
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 14 (м. «Маяковская»)
Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)
Email: cstechexpert@mail.ru
www.csstechexpert.ru

Часы работы Центра технического обслуживания в Москве:
пн-пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед),
сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед),
вс и праздничные дни – выходной

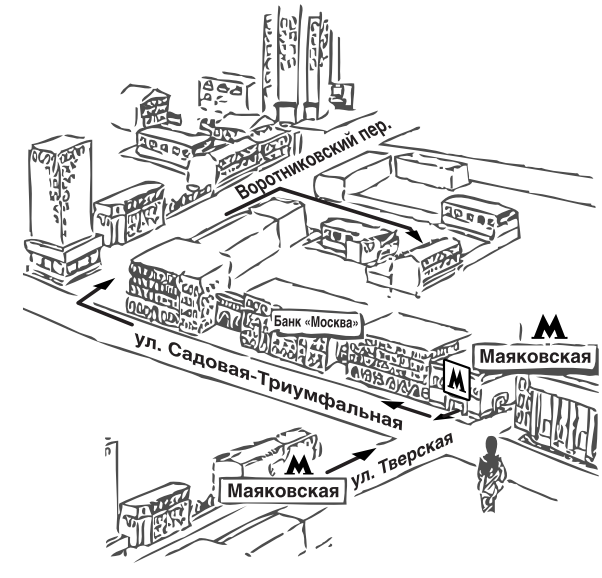

CS
СИЭС МЕДИКА

Произведено по заказу и под контролем ООО «СиЭс Медика», импортера и уполномоченного представителя производителя, официального представителя торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также государств-членов Таможенного союза

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9
Тел.: (495) 363-16-52
Тел./факс: (495) 363-16-56
Email: csinfo@csmedica.ru
www.csmedica.ru, csmedica.ru
Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

Производитель:
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD (НИНБО СИГОВУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)
No.239 Jianguo Road, Zone C Hongtang IndustrialPark, Jiangbei District, Ningbo, China (№ 239 Цзянгу Род, Зоун С Гонтанг Индастриал Парк, Цзянбэи Дистрикт, Нинбо, Китай)

Сделано в Китае

Дата выпуска текущей версии руководства по эксплуатации: 24.05.2019

- Армамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_medicarm@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 188б, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архиперейская, д. 2А, оф. 10, тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41 тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф.24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, Офис «СиЭс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Степанова, д. 5, оф. 105, (4932)26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74 office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЭс Медика Чебоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mari-el.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemerovo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СиЭс Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omgop@kubannet.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru

- Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала», ул. Батыева, д. 11, оф. 734, тел.: (8722) 55-85-40, (928) 941-00-20, csmahachkala@mail.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 19б, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моб.: (982) 145-15-20, cstyumen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Новокузнецк», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (3843) 60-05-18, 46-46-44 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссийск, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Леднева, д. 5, тел.: (8617) 75-15-00, +7-938-525-15-00, cs_medicanov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedika_omsk@mail.ru
- Орёл, ООО «СиЭс Медика Орел», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00, orei@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье», Московская обл. г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, csposdmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Россошь, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 1, оф. 306, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, csmedica-samara@sama.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@sama.ru

- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», Малодетскосельский пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 309-09-80, csnw@csmedica.ru Сервисно-консультационный центр, Малодетскосельский пр-т, д. 36, лит. Н, тел. (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЭс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsararov@mail.ru
- Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жильцовой, д. 4, пом.2, тел.: (978) 137-90-68, +7(978)137-90-68, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск», пр-т Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №10, тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41 cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов», ул. Орехова, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», б-р Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-itt@yandex.ru
- Томск, ООО «СиЭс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Холодильная, д. 142, оф. 12, тел.: (3452) 34-22-70, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Свердлов, д.12Г, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica-amur@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда», пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, моб.:(921)834-78-65 csmedicacherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Юнова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 yaroslavl@csmedica.ru