


Массажный пистолет Calmer Pro MS1 (белый)

Руководство пользователя



Комплектация

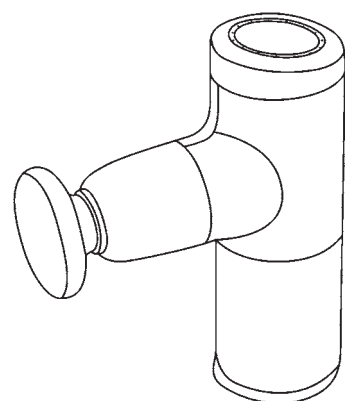

Плоская насадка


(подходит для расслабления и формирования мышц)

Цилиндрическая насадка

(для работы с акупунктурными точками или с глубокими мышцами)

U-образная насадка

(для работы с зоной позвоночника и шеи)

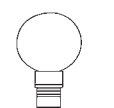

Шаровая насадка

(подходит для массажа всех частей тела)

Технические характеристики

- Модель: MS1
- Напряжение: 8,4 В
- Номинальный ток: 2А
- Входной параметр: 5V—2А
- Максимальная скорость: 3200 об/мин
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч



Вкл/выкл

- Нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение трех секунд.
- Повторно нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение трех секунд, чтобы выключить устройство.




Регулировка мощности

- Стартовая передача - это первая передача.
- Нажмите кнопку "Пуск" один раз, чтобы увеличить скорость на одну передачу.
- Максимальная скорость - четвертая.

Примечание: чтобы защитить кости и мышцы, избегайте длительного точечного массажа, который может привести к повреждениям.

Замена насадки

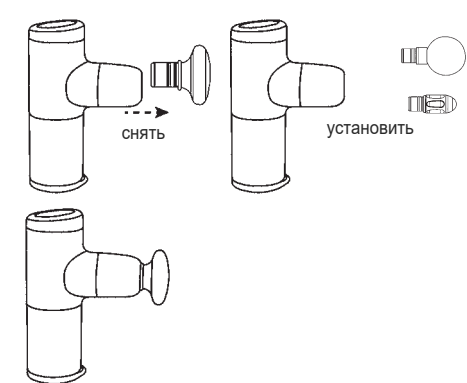


Световой индикатор

- Световой индикатор показывает установленную мощность.
- Первая передача - горит один индикатор.
- Вторая передача - горит два индикатора и т.д.




- Сигнальный индикатор всегда загорается зеленым при включении аппарата. Четыре контрольных лампочки загорятся по очереди.
- При зарядке сигнальный индикатор горит красным светом.
- Сигнальный индикатор горит зеленым светом, когда аккумулятор полностью заряжен.

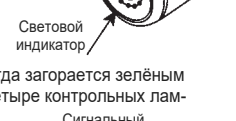

- При включении питания сигнальный индикатор достаточном заряде мигает 3 раза каждые 5 секунд, 2 раза каждые 5 секунд, когда мощность ниже 60%, и 1 раз каждые 5 секунд, когда мощность ниже 30%.

Зарядка

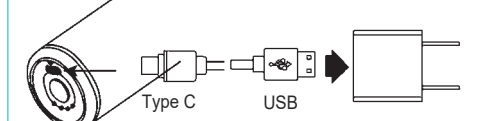

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- Сигнальный индикатор горит красным при зарядке и зеленым после завершения зарядки.
- Время зарядки составляет около 4 часов, а максимальное время работы - около 11,5 часов.
- Когда заряд составляет менее 10%, сигнальная индикатор мигает красным.
- Для обеспечения безопасности не используйте массажный пистолет во время зарядки.
- Чтобы продлить срок службы батареи, сигнальная лампочка мигает красным и заряжается как можно скорее.


Показания

- Устранение боли и спазмов мышц, растяжения связок и перенапряжения
- Снятие отеков
- Уменьшение накопления молочной кислоты в мышцах
- Увеличение подвижности суставов
- Устранение мышечной усталости

Противопоказания

- Беременность
- Не использовать во время прохождения реабилитации после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.

Комплектация

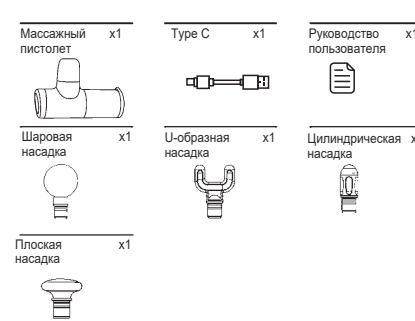

Правила техники безопасности

Внимание: чтобы снизить риск поражения электрическим током, возгорания и травм, этот продукт необходимо использовать в соответствии со следующими инструкциями.

- 1) Использовать только на сухую чистую кожу тела, нельзя использовать через одежду.
- 2) Нажмите и аккуратно проведите устройством по коже. Используйте это устройство только на мягких тканях тела, не вызывая боли и дискомфорта.
- 3) Не используйте устройство на голове или любой твердой или костной части тела.
- 4) Снятие может появиться как при умеренном, так и при нормальном давлении. Пожалуйста, всегда проверяйте зону, в которой проводится физиотерапия.
- 5) Немедленно прекратите использование, как только появятся признаки боли или дискомфорта.
- 6) Держите пальцы, волосы или другие части тела подальше от вала и задней части вибрирующей головки, так как они могут быть защемлены.
- 7) Не помещайте никакие предметы в вентиляционное отверстие устройства.
- 8) Не погружайте в воду и не допускайте попадания воды в вентиляционное отверстие устройства.
- 9) Не роняйте устройство и не используйте его ненадлежащим образом.
- 10) Перед каждым использованием внимательно проверяйте устройство и аккумулятор.
- 11) Ни в коем случае не меняйте и не модифицируйте устройство.
- 12) Никогда не заряжайте устройство без присмотра.