



Model: P80

## Звуковая электрическая зубная щетка

### Руководство по эксплуатации (RU)

Благодарим вас за выбор звуковой зубной щетки Fairywill P80. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед использованием продукта и сохраните руководство пользователя в надежном месте для использования в будущем.

#### 1. Характеристики:


- Водонепроницаемый и нескользящий корпус.
- Сменные чистящие насадки с уникальной трехмерной формой щетины и функцией напоминания о замене щетины, чтобы ваши зубы оставались белее и здоровее.
- Высокочастотная вибрация эффективно удаляет зубной налет, глубоко очищая зубы и десны и предотвращая гингивит.
- С помощью индикатора давления пользователи могут узнать, когда давление слишком велико для их зубов.
- USB-зарядка, удобство для путешествий и совместимость с мировым напряжением.
- Функция напоминания о низком заряде: при низком заряде аккумулятора индикатор будет продолжать быстро мигать или зубная щетка не сможет включиться во время рабочего процесса, как напоминание о необходимости зарядки зубной щетки.
- 2-минутный интеллектуальный таймер с интервальными паузами, который

напомнит вам менять место чистки каждые 30 секунд.

- В зубной щетке есть 5 режимов: отбеливание, чистка, чувствительный, полировка и массаж. В щетку также встроена функция памяти режимов, что означает, что при включении зубной щетки начальный режим по умолчанию остается таким же, как и режим, который был установлен во время последнего отключения зубной щетки.

## 2. Конструкция:

- ① Насадка щетки
- ② Индикатор давления
- ③ Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ
- ④ Отбеливание
- ⑤ Чистка
- ⑥ Чувствительный
- ⑦ Полировка
- ⑧ Массаж
- ⑨ Индикатор зарядки
- ⑩ Порт зарядки

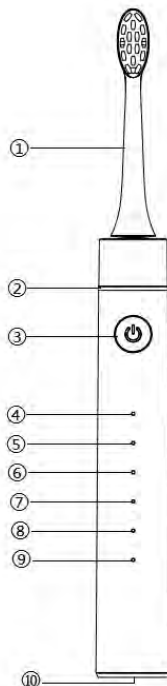

## 3. Операции:

### ☆ Использование зубной щетки

- Задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке и убедитесь, что она зафиксирована в правильном положении.
- Включите зубную щетку, нажав кнопку «Питание».
- Переключайтесь между 5 режимами («Отбеливание, Чистка, Чувствительный, Полировка и Массаж»), непрерывно нажимая кнопку «Питание».

- Смочите щетину и нанесите на щетку необходимое количество зубной пасты.
- Приложите щетину с зубной пастой к зубам под небольшим углом к линии десен.
- Осторожно проведите насадкой по зубам на передней, задней и всех жевательных поверхностях. Щетка должна скользить по зубам с минимальным давлением. Не прикладывайте слишком сильное давление к зубам / деснам и не прикладывайте щетину к одной области рта в течение длительного периода времени.
- Если давление на зубы составляет  $\geq 250$  г, индикатор давления загорится красным, чтобы напомнить пользователям о необходимости быть осторожными при чистке или переключении на подходящий собственный режим.
- Щетка оснащена 2-х минутным интеллектуальным таймером, так как стоматологи рекомендуют это время как оптимальное время для чистки зубов, и каждые 30 секунд есть пауза, чтобы напоминать о необходимости перейти в другую часть ротовой полости.
- Перейдите в другую часть ротовой полости, когда почувствуете паузу, а зубная щетка автоматически выключится через 2 минуты.
- Чтобы избежать разбрызгивания зубной пасты, включайте зубную щетку только после того, как прижали ее к зубам, и вынимайте ее изо рта только после выключения.

#### ☆ Замена насадки для зубной щетки

- Установка: задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке. Убедитесь, что она находится в правильном положении.
- Отсоединение: крепко держите основание, затем потяните насадку зубной щетки от ручки.

#### ☆ Зарядка зубной щетки

- Если при первом включении зубная щетка разряжена, убедитесь, что она

полностью заряжена для повторного включения.

- Если зубная щетка не используется более 3 месяцев, перед использованием полностью зарядите ее в соответствии с инструкциями по зарядке.
- Если во время работы индикатор быстро мигает, это означает, что в зубной щетке разряжен аккумулятор, зарядите зубную щетку как можно скорее.
- Когда вы собираетесь заряжать зубную щетку, вставьте USB-кабель в порт зарядки в нижней части зубной щетки и убедитесь, что щетка надежно подключена к источнику питания.
- Индикатор зарядки будет белым и будет медленно мигать во время процесса зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор загорится на две минуты и больше не будет мигать, через 2 минуты он автоматически выключится. После того, как зубная щетка полностью зарядится, ее можно использовать в течение двух минут за сеанс дважды в день в течение 30 дней.
- Зубная щетка обладает водонепроницаемой функцией, поэтому ее можно безопасно использовать в ванной.

## ☆ Режимы

### ● Первый режим: Отбеливание

В этом режиме белый индикатор включается в положении режима «Отбеливание», где размах щетки большой, а интенсивность вибрации самая сильная. Подходит для пользователей, которые предъявляют высокие требования к чистящему эффекту и не имеют чувствительных зубов.

### ● Второй режим: Чистка

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима «Чистка», где движение щетки нормальное, а интенсивность вибрации находится на средней скорости. Он подходит для нормального состояния ротовой полости, для получения сильнейшего очищающего эффекта и поддержания здоровой гигиены полости рта.

### ● Третий режим: Чувствительный

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима «Чувствительный», где движение щетки мягкое, а интенсивность вибрации самая мягкая из пяти режимов, что подходит для пользователей с чувствительными зубами.

### ● Четвертый режим: Полировка

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима «Полировка», где движения щетки и интенсивность вибрации быстро меняется. Такой эффект можно использовать для дополнительной обработки области резов, имеющей отбеливающий эффект.

### ● Пятый режим: Массаж

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима «Массаж», где движения щетки и интенсивность вибрации меняется медленно. Эта мягкая стимуляция призвана сохранить упругость и здоровье десен.

## 4. Технические характеристики:

Рабочая температура: 0-50°C

Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока

Материал щетины: нейлон

Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока

Номинальная мощность: 2 Вт

Водонепроницаемость: IPX7

## 5. Меры предосторожности:

- Запрещается разбирать, ремонтировать или изменять продукт без разрешения.
- Людям, страдающим тяжелыми заболеваниями пародонта или имевшим хирургические вмешательства в полости рта, следует проконсультироваться

с врачом перед использованием.

- Дети, младенцы и люди, которые не могут самостоятельно управлять щеткой, должны находиться под присмотром родителей или взрослых.
- Не замачивайте изделие в воде на продолжительное время.
- Не помещайте зубную щетку в условия высокой температуры и не подвергайте ее воздействию солнечных лучей.
- Не прижимайте щетину сильно к зубам или деснам.
- Не подходит для детей младше 12 лет.

## **6. Послепродажное обслуживание:**

- Годовая гарантия начинается с дня покупки, при необходимости свяжитесь с Fairywill.
- В течение гарантийного срока при любом дефекте материала или неисправности продукта, мы заменим детали или весь продукт в зависимости от ситуации и его состояния.
- Когда вы подаете заявку на гарантийный ремонт, вы должны предоставить Fairywill зубную щетку и подтверждение даты покупки (счет-фактуру).
- Гарантия не распространяется на следующее:
  - Повреждения, вызванные неправильным использованием, например, неправильным использованием источника питания, подключением к неправильной розетке, неестественным повреждением и т.д.
  - Старение и износ в результате нормального использования.
  - Повреждения из-за использования продукта для других целей или использования компонентов, не от Fairywill.