


# REVYLINЕ

## RL 450

Ирригатор для полости рта

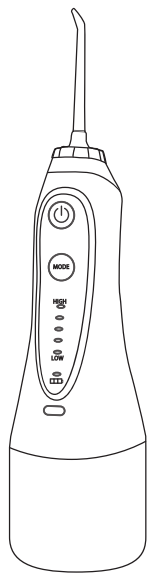

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



#### Поздравляем!

Уважаемый клиент, Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит Вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

#### Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора Revyline RL 450 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

#### Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
7. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
8. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
9. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
10. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
11. Не заливайте в резервуар ополаскивателя, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
12. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
13. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
14. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
15. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

#### Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора необходимо ирригатор подключить в электросеть к устройству или блоку питания с USB разъёмом посредством кабеля, входящего в комплект. Во время подзарядки аккумулятора происходит мигание индикаторов режимов на дисплее корпуса. Прекращение мигания индикатора свидетельствует о том, что зарядка аккумулятора завершена. При разряженном аккумуляторе загорается индикатор красного цвета. При первом использовании прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью. После полной зарядки аккумулятора загорается синий индикатор. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4-5 часов в зависимости от источника питания.

**Внимание!** Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

#### Выбор режима работы

Прибор может работать в режиме чистки (ирригации) с различными уровнями давления:

- 1 — 130 кПа;
- 2 — 270 кПа;
- 3 — 550 кПа;
- 4 — 650 кПа;
- 5 — 760 кПа.

Выбор уровня давления в режиме чистки осуществляется кнопкой «Mode», что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на корпусе устройства. После включения ирригатор будет работать в том режиме, какой использовался последним перед отключением устройства.

**Внимание!** В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.



#### Установка и замена насадки

Установите насадку в разъём, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте её до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

#### Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

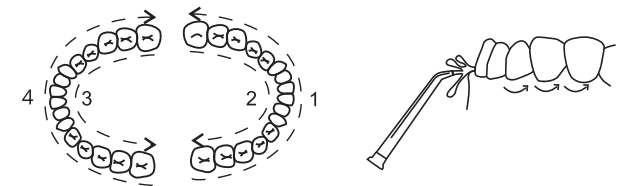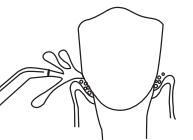

#### После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите прибор.

#### Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

**Внимание!** В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге снизить срок его эксплуатации.

#### Уход и обслуживание

Не погружайте устройство в воду. Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении. Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора. При регулярном использовании жёсткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

**Внимание!** Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

#### Насадки в комплекте

В базовой комплектации прибора пять насадок:



Они имеют кольца различных цветов, что позволяет идентифицировать насадки для каждого пользователя. После 3-6 месяцев регулярного использования насадку рекомендуется менять из соображений гигиены.

**Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

**Внимание!** Насадки тип А и тип В несовместимы с данной моделью ирригатора.

#### Гарантия

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

#### Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие;  
 На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации;  
 На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания;  
 На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками;  
 На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей;  
 На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

#### Распространенные проблемы и их решение

##### Не извлекается насадка.

**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на корпусе прибора.

##### Сложность выбора уровня напора струи.

**Решение:** После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте специальную пародонтальную насадку.

##### Кровоточивость во время ирригации.

**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии с поверхности десен. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

##### Как предотвратить разбрызгивание воды?

**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом стекать из полости рта.

#### Комплектация

Основной блок ирригатора Revyline RL 450;

Насадки:

- Стандартная насадка — 2 шт.;
- Насадка для чистки языка — 1 шт.;
- Пародонтологическая насадка — 1 шт.;
- Ортодонтическая насадка — 1 шт.;

Резервуар;

Кабель USB;

Дорожный чехол;

Инструкция по эксплуатации.

#### ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА REVYLINЕ

Модель: RL 450

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен

Уровень давления воды: от 130 до 760 кПа.

Частота пульсации: до 1700 в мин.

Емкость резервуара: 240 мл.

Материал корпуса: ABS (ударопрочный пластик).

Влагозащита: IPX7.

Питание: аккумулятор 2000 mAh.

Время полной зарядки: 4-5 часов (в зависимости от источника питания).

Товар не имеет срока годности.

Средний срок службы: 5 лет.

Гарантия: 2 года.

Хранить при комнатной температуре.

Произведено по заказу ИП Обушников М.А., г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, корп. 1.

Изготовлено: Shenzhen BFT Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd 3F, Bldg 10, Changxing S&T park, Wanan Rd, Shayi, Shajing Town, Baoan Dist., SZ.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru

## Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи.....

Место для печати