


RL 610

Ирригатор для полости рта портативный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

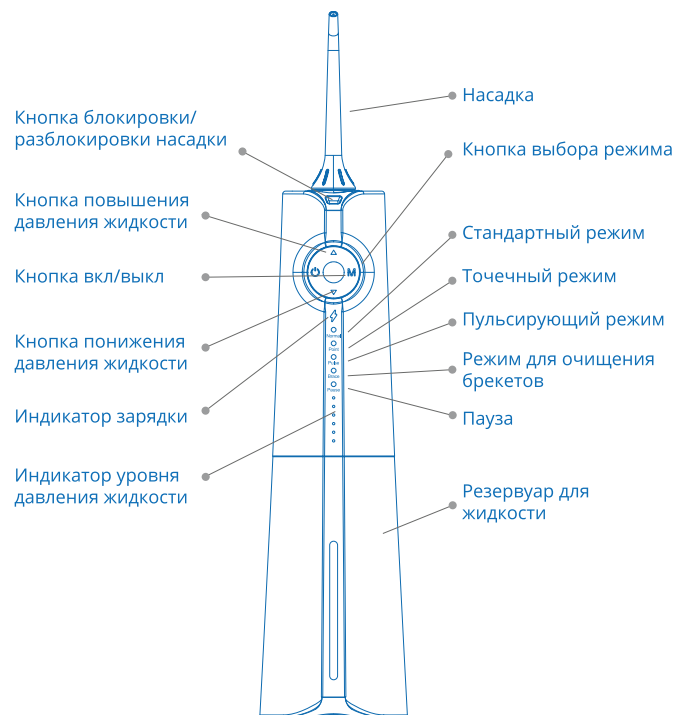

Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора Revlyne RL 610 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

те ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

Если в течение последних 2 месяцев вами была проведена операция в полости рта, перед использованием ирригатора необходимо проконсультироваться с врачом. Следуйте его советам и рекомендациям.

После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revlyne. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

Внимание! В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге снизить срок его эксплуатации.

Уход и обслуживание

Не погружайте устройство в воду. Запрещено хранить жидкость в резервуаре. Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора. При регулярном использовании жёсткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revlyne для очистки ирригатора согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

Внимание! Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

Насадки в комплекте

Стандартные насадки для регулярного использования – 2 шт.

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями запрещено. Рекомендуется менять насадку каждые 3 месяца.

Внимание! Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

Гарантия

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие.

На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.

На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Остерегайтесь попадания воды в разъем для зарядки, намкания USB-кабеля.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
10. Не заливайте в резервуар ополаскивателя, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
11. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
12. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
13. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
14. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор в течение 8 часов.

Ирригатор заряжается через провод USB Type-C — самый актуальный на сегодняшний день тип разъёма.

1. Выключите прибор.
2. Вставьте микро-USB кабель в разъем, расположенный на корпусе прибора. Подсоедините USB-разъем кабеля к зарядному устройству (в комплекте не поставляется) или работающему электронному прибору, выходное напряжение которого составляет 5 вольт (включая мобильный банк питания, компьютерный USB-порт, зарядное устройство для мобильного телефона и другие выходные адаптеры с мощностью 5 вольт).

Во время зарядки индикатор зарядки будет гореть красным светом. При полной зарядке цвет индикатора меняется на зеленый.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя. Корпус ирригатора должен находиться на ровной горизонтальной поверхности. Разъем для зарядки должен быть сухим.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима в течение 0,5 сек.

Индикаторы	Уровень заряда
Горят 5 индикаторов	85-100%
Горят 4 индикатора	60-84%
Горят 3 индикатора	50-59%

На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.

На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей.

На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Распространенные проблемы и их решение

Не извлекается насадка.

Решение: Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на корпусе прибора.

Сложности выбора уровня напора струи.

Решение: После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте специальную пародонтальную насадку (приобретается дополнительно).

Кровоточивость во время ирригации.

Решение: Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

Как предотвратить разбрызгивание воды?

Решение: Во время ирригации не стойте вертикально с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом стекать из полости рта.

Комплектация

- Основной блок ирригатора Revlyne RL 610.
- Резервуар для жидкости.
- Стандартная насадка – 2 шт.
- Кабель USB.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

Горят 2 индикатора	20-49%
Горит 1 индикатор	Менее 20%

Включение прибора

Установите насадку в гнездо, расположенное на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте её до щелчка. Необходимо отсоединить резервуар от корпуса. Для этого поверните резервуар по часовой стрелке (вправо) на 45 градусов. После этого наполните его водой и снова присоедините к корпусу, повернув на 45 градусов влево. Для включения прибора нажмите и удерживайте в течение 0,3 секунды кнопку вкл/выкл.

Внимание! Во время заполнения резервуара водой включать ирригатор нельзя.

Выбор режима работы

Стандартный режим: стандартное давление потока жидкости, высокоэффективное очищение, подходит для ежедневной гигиены полости рта. Точечный режим: в течение 3 секунд ирригатор подает пульсирующую струю жидкости под давлением, затем следует пауза и цикл повторяется. Режим эффективен для устранения частиц пищи из межзубных промежутков.

Пульсирующий режим: ирригатор подает струю жидкости, чередуя высокое и низкое давление. Режим рекомендован для массажа десен и ежедневного применения.

Режим для очищения брекетов.

Пауза: нажимая на кнопку вкл/выкл, вы можете ослабить или приостановить подачу воды. Режим экономит воду и удобен для очищения отдельных зон.

Белый свет индикаторов отмечает выбранный режим (5 значений).

Важно: ирригатор имеет встроенный таймер на 2 минуты. После 2 минут работы прибор отключается автоматически. Чтобы включить его снова, нажмите на кнопку вкл/выкл.

Выбор уровня давления жидкости

Используйте кнопки повышения и понижения давления жидкости, чтобы выбрать нужный уровень. Чем больше зеленых индикаторов (от 1 до 6) загорается на корпусе прибора, тем выше уровень давления.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части рукоятки, и, надавливая, вставьте её до щелчка. Для снятия насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

Установка резервуара для жидкости

Как показано на картинке, удерживайте корпус ирригатора левой рукой, а правой поверните резервуар по часовой стрелке и, потянув, отделите от корпуса. Чтобы установить резервуар, совершите обратные действия.

Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включи-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RL 610.
Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.
Уровень давления воды: от 207 до 828 кПа.
Объем резервуара: 230 мл.
Материал корпуса: ABS (ударопрочный пластик).
Влагозащита: IPX7.
Питание: литиевый аккумулятор 1500 mAh.
Зарядка: USB Type-C
Товар не имеет срока годности.
Средний срок службы: 5 лет.
Гарантия: 2 года.
Хранить при комнатной температуре.

Произведено по заказу ИП Обушенкова М. А., г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 425
Изготовитель: Shenzhen BFT Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd., 3F, Bldg 10, Changxing S&T park, Wanan Rd, Shayi, Shajing Town, Baoan Dist., Shenzhen, China

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49

www.revlyne.ru

Гарантийный талон

Название организации

Дата продажи.....

Место для печати