



# REVYLINЕ

## RL 660

### Ирригатор для полости рта

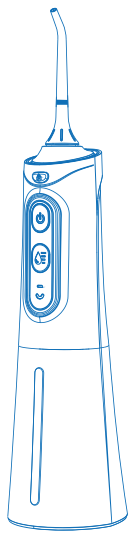

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

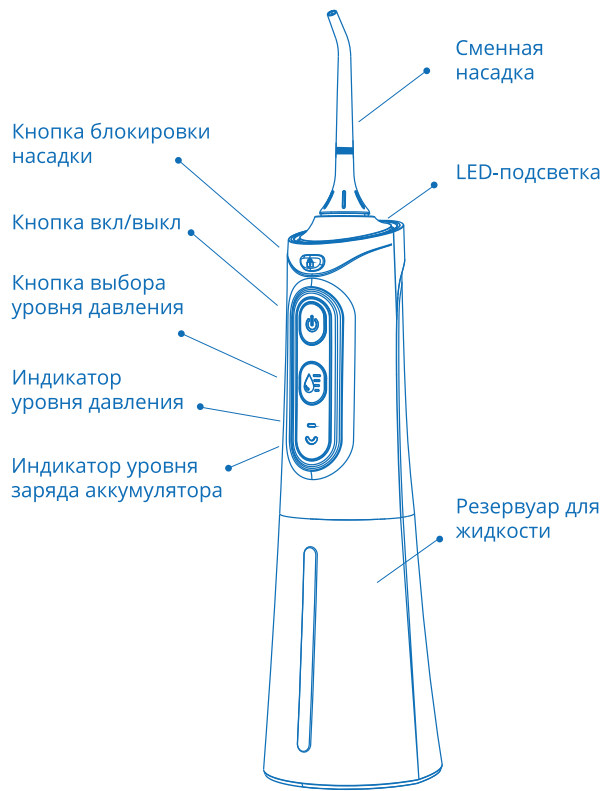

#### Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

#### Меры предосторожности

Перед первым применением щетки Revyline RL 660 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Остерегайтесь попадания воды в разъем для зарядки, намокания USB кабеля.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
10. Не заливайте в резервуар ополаскивателя, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
11. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
12. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
13. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
14. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

#### Зарядка аккумулятора

При первом использовании прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью. Вставить микро-USB кабель в разъем, расположенный на корпусе прибора. Подсоединить USB-разъем кабеля к зарядному устройству (в комплекте не поставляется) или работающему электронному прибору, выходное напряжение которого составляет 5 вольт (включая мобильный банк питания, компьютерный USB-порт, зарядное устройство для мобильного телефона и другие выходные адаптеры с мощностью 5 вольт).

Во время зарядки индикатор зарядки будет гореть красным светом. При полной зарядке цвет индикатора меняется на зеленый. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4-5 часов в зависимости от источника питания.

**Внимание!** Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

#### Проверка уровня заряда аккумулятора

Нажмите и удерживайте кнопку регулировки давления воды. Уровень заряда будет отображаться в соответствии с цветом загоревшегося индикатора. Голубой цвет – уровень заряда аккумулятора более 60%. Зеленый цвет – от 15 до 59%. Красный цвет – менее 15%.

#### Включение прибора

Установите насадку в гнездо, расположенное в верхней части ирригатора и, надавливая, вставьте её до щелчка. Необходимо отсоединить резервуар от корпуса. Для этого поверните резервуар по часовой стрелке (вправо) на 45 градусов. После этого наполните его водой и снова присоедините к корпусу, повернув на 45 градусов влево. Для включения прибора нажмите и удерживайте в течение 0,3 секунды кнопку вкл/выкл. **Внимание!** Во время заполнения резервуара водой включать ирригатор нельзя.

#### Выбор режима работы

Конструкция ирригатора Revyline RL 660 позволяет выбрать любой уровень давления (в диапазоне от 210 до 820 кПа). Плавная регулировка давления позволяет подобрать оптимальный уровень индивидуально.

После включения прибора нажмите и удерживайте кнопку регулировки давления жидкости. Давление жидкости будет постепенно увеличиваться. Когда вы почувствуете, что уровень давления жидкости вам подходит, отпустите кнопку. Нужный уровень давления будет сохранен. При следующем использовании нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл для включения прибора. Ирригатор будет работать в том режиме, который использовался последним перед отключением устройства.

Для изменения режима уровня давления нажмите и удерживайте кнопку регулирования давления жидкости до тех пор, пока сила напора струи не станет для вас оптимальной.

**Внимание!** В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

#### Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенной в верхней части рукоятки, и, надавливая, вставьте её до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

#### Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

Если в течение последних 2-х месяцев вам была проведена операция в полости рта, перед использованием ирригатора необходимо проконсультироваться с врачом. Следуйте его советам и рекомендациям.



#### После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

#### Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

**Внимание!** В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге снизить срок его эксплуатации.

#### Уход и обслуживание

Не погружайте устройство в воду. Запрещено хранить жидкость в резервуаре. Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

**Внимание!** Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.


#### Насадки в комплекте

Стандартные насадки для регулярного использования – 2 шт. **Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями запрещено. После 3-6 месяцев регулярного использования насадки рекомендуется менять из соображений гигиены. Рекомендуется менять насадку каждые 3 месяца.

#### Гарантия

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

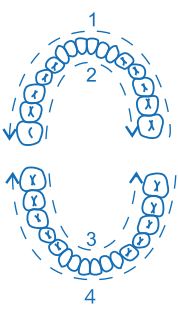

#### Гарантия не распространяется:

- на расходные материалы и комплектующие;
- на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации;
- на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания;
- на товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками;
- на неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей;
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

#### Распространенные проблемы и их решение

##### Не извлекается насадка.

**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на корпусе прибора.

##### Сложности выбора уровня напора струи.

**Решение:** После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте специальную пародонтальную насадку (приобретается дополнительно).

##### Кровоточивость во время ирригации.

**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

##### Как предотвратить разбрызгивание воды?

**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом стекать из полости рта.

#### Комплектация

Основной блок ирригатора Revyline RL 660;  
Резервуар для жидкости;  
Стандартная насадка – 2 шт.;  
Кабель USB;  
Инструкция по эксплуатации.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RL 660  
Предназначен для профилактики болезней зубов и десен  
Уровень давления воды: от 210 до 820 кПа  
Частота пульсации: 1 400-1 800 в мин  
Емкость резервуара: 250 мл  
Материал корпуса: ABS (ударопрочный пластик)  
Влагозащита: IPX7  
Питание: литиевый аккумулятор 1 500 mAh  
Время полной зарядки: 4 часа  
Габариты: 65.5 X 208.5 X 283.9 мм  
Вес: 230 г  
Товар не имеет срока годности  
Средний срок службы: 5 лет  
Гарантия: 2 года  
Хранить при комнатной температуре

Произведено по заказу ИП Барсовой Н. Э  
Россия, г. Москва, ш. Варшавское, дом 152/2  
Изготовлено: Shenzhen Yuxinyuan Electronic  
Technology Co., Ltd. 301, No.2 Hualangjia Industrial  
Park, No.28 Tongfuyu Industrial Area, Kukeng  
Community, Guanlan Street, Longhua District,  
Shenzhen, China. Tel: +86 755 2373 6847

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru

#### Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи .....

Место для печати