



# Массажное кресло VictoryFit VF-M58



Инструкция по эксплуатации

# Содержание

I. Содержание.....	2
II. Меры предосторожности.....	3
1. Условия эксплуатации.....	3
2. Предостережения.....	3
III. Подготовка к использованию.....	6
1. Установка сиденья.....	6
2. Регулировка сиденья.....	6
3. Перемещение.....	7
4. Выбор расположения.....	7
5. Включение.....	8
IV. Название и функции основных компонентов.....	9
V. Панель управления.....	9
VI. Пульт управления.....	10
VII. Ежедневный уход.....	14
VIII. Технические характеристики.....	14
Гарантийные обязательства.....	15



## II. Меры предосторожности

### 1. Условия эксплуатации

(1) Во избежание появления плесени, поражения током, возгорания или механических повреждений не храните и не эксплуатируйте кресло в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната, сауна, термальные источники и т.д.

(2) Не используйте кресло в помещениях с комнатной температурой выше 40°C.

(3) Не используйте кресло вне помещения.

(4) Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли или грязи, а также в помещениях с недостатком свежего воздуха.

(5) Не оставляйте кресло вблизи источников тепла или нагревательных приборов, а также под воздействием прямого солнечного света. Это может привести к перегреву комплектующих кресла и к возможному возгоранию.

(6) Не размещайте кресло на неровной поверхности. Выбирайте для этого только ровные поверхности.

(7) Во избежание поражения электрическим током убедитесь в том, что розетка надлежащим образом заземлена. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу заземления.

(8) Не курите во время использования кресла.

### 2. Предостережения

Следующим категориям людей необходимо проконсультироваться с врачом или перед использованием кресла или воздержаться от его использования. В противном случае это может привести к дискомфорту и даже к риску опасных несчастных случаев.



- (1) Лица со злокачественными опухолями или гнойными нарывами.
- (2) Лица с тяжелыми болезнями сердца.
- (3) Лица с тяжелыми кожными заболеваниями.
- (4) Лица с тяжелым остеоартритом.
- (5) Беременные женщины.
- (6) Лица, проходящим реабилитацию под руководством врача, в особенности при наличии физических отклонений.
- (7) Лица с искривлением позвоночника или горбом, вызванными травмами или заболеваниями.
- (8) Лица с деформированными суставами.
- (9) Лица с имплантированными медицинскими устройствами, такими как кардиостимулятор.
- (10) Лица с острыми симптомами заболеваний внутренних органов (гастрит, энтерит, дизентерия, гепатит и т.д.)
- (11) Лица с тяжелыми нарушениями циркуляции крови в ногах.
- (12) Определенная часть поверхности кресла может сильно нагреваться, поэтому лицам с нарушениями чувствительности и или отсутствием чувствительности к теплу нужно проявлять особую осторожность.
- (13) Лица с повышенной температурой тела.
- (14) Кресло не рекомендуется использовать лицам (включая детей), страдающим физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также не имеющими соответствующих навыков и знаний, без сопровождающего лица, ответственного за их безопасность и помогающего в эксплуатации кресла.
- (15) Внимательно следите, чтобы дети не играли с



креслом.

(16) В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить соответствующей запасной частью, полученной у производителя или в службе технического обслуживания.


### **ВНИМАНИЕ!**

**Не позволяйте лицам младше 18 лет и лицам, не способным контролировать свое поведение (например, психически больным, умственно отсталым, парализованным и т.д.), самостоятельно эксплуатировать массажное кресло или касаться его частей. Это может привести к поражению электрическим током, травме или поломке кресла.**



### III. Подготовка к использованию

#### 1. Установка сиденья

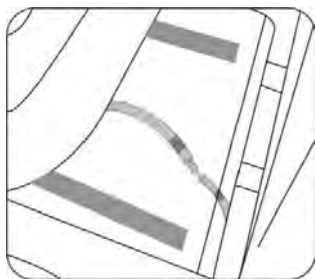


Извлеките и подключите



трубки через соединение

#### 2. Регулировка сиденья

При помощи кнопок подъема и опускания сиденья, а также других вспомогательных кнопок отрегулируйте наиболее удобное положение тела в кресле.

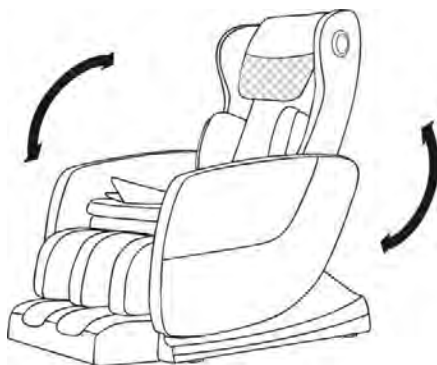

**ВНИМАНИЕ :** При регулировании спинки и отделения для ног следите, чтобы спереди и сзади кресла оставалось достаточно места.



### 3. Перемещение


При перемещении поднимайте оба подлокотника

Внимание!

Не перемещайте кресло с сидящим на нем человеком.

Не ставьте кресло на легко повреждаемое покрытие.

Для перемещения используйте специальные колесики.

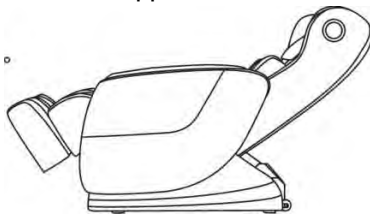

### 4. Выбор расположения


Перед проведением массажа убедитесь, что вокруг кресла достаточно свободного места.

(1) Убедитесь в наличии достаточного места для откидывания спинки кресла и подъема отделения для ног.

(2) Убедитесь, что перед и позади массажного кресла есть не менее 40 см свободного места.

(3) Убедитесь, что перед массажным креслом и позади него нет препятствий.


(4) Пожалуйста, положите ковер под массажное кресло, чтобы не повредить напольное покрытие.

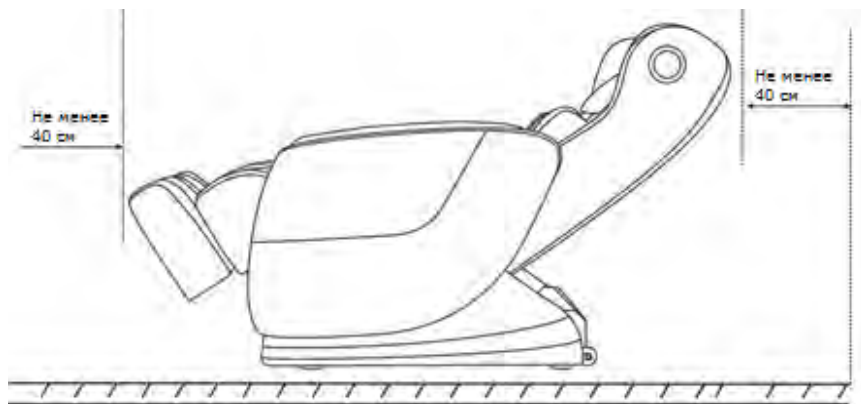

## 5. Включение

(1) Осмотритесь

Убедитесь, что вокруг нет препятствий.

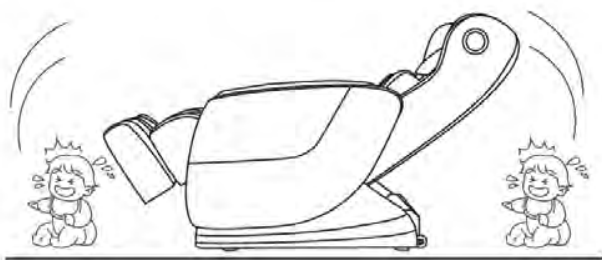

(2) Подключите вилку шнура питания в розетку и нажмите кнопку питания.


### Обратите внимание

- ① Перед включением проверьте, не зажат ли шнур питания под массажным креслом.
- ② Убедитесь в наличии заземления.
- ③ Убедитесь, что все переключатели на кресле (включая кнопку питания) выключены, прежде чем вставлять вилку в розетку.





## IV. Название и функции основных компонентов

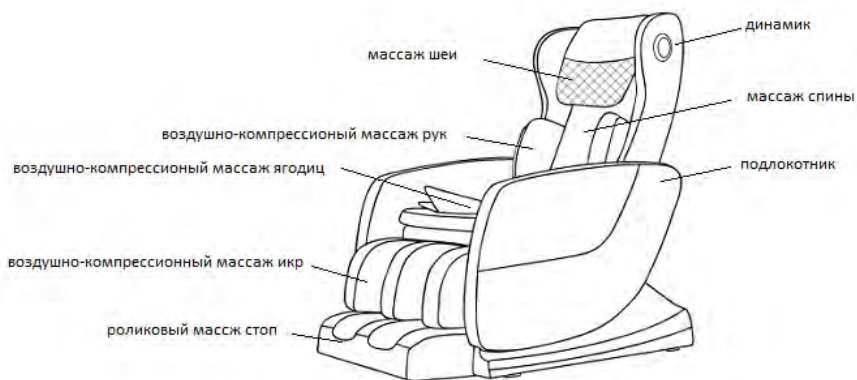

## V. Панель управления



## VI. Пульт управления

Кнопка включения



Автоматический режим

Массаж шеи/спины



Увеличение интенсивности массажа

Массаж ног

Снижение интенсивности массажа

Воздушная подушка для шеи/рук/ног



Установка таймера

Нагрев



Кнопка подъема спинки



Кнопка опускания спинки



## Функции пульта управления

### Описание кнопок пульта управления



#### Кнопка включения

По умолчанию включается автоматический режим.



#### Кнопка переключения автоматических программ

Предусмотрено 20 автоматических программ.

### Ручной режим:



#### Кнопка массажа шея/спина

В ручном режиме кнопка переключает между массажем зоны шеи и спины.



#### Кнопка Массажа ног

Включение и выключение массажа ног.



#### Кнопка увеличения интенсивности массажа

Нажатие кнопки увеличивает интенсивность массажа. Всего предусмотрено 3 уровня: низкий средний и высокий.



#### Кнопка снижения интенсивности массажа

Нажатие кнопки снижает интенсивность массажа. Всего предусмотрено 3 уровня: низкий средний и высокий.





### **Кнопка переключения воздушной подушки**

В автоматическом режиме происходит переключение между массажем шеи, рук и ног.



### **Кнопка нагрева**


Включает и выключает нагрев зоны поясницы и ног




### **Кнопка таймера**

Включение таймера и установка длительности массажа: 15-20-25-30 минут.

### **Кнопка подъема спинки**

Нажмите и удерживайте кнопку "  " для подъема спинки. (Во время подъема спинки все функции массажа приостанавливаются. После фиксации нужного положения при отпускании кнопки ранее выбранный режим массажа автоматически восстанавливается).

### **Кнопка опускания спинки**

Нажмите и удерживайте кнопку "  " для опускания спинки. (Во время опускания спинки все функции массажа приостанавливаются. После фиксации нужного положения при отпускании кнопки ранее выбранный режим массажа автоматически восстанавливается).



## Переключение режима

Автоматический режим: в автоматическом режиме доступно 20 программ массажа

Ручной режим: для перехода в ручной режим, находясь в автоматическом режиме, нажмите необходимые кнопки управления и выберите желаемые массажные функции.

## Подключение по Bluetooth

- ① По умолчанию функции Bluetooth и голосовых подсказок на кресле включены.
- ② Включите на мобильном телефоне Bluetooth и выполните поиск устройства LEK-988AMY. Введите пароль для подключения – 8888. Подключение успешно выполнено. Поскольку подключение по Bluetooth требует подтверждения на ответном устройстве, нажмите кнопку подтверждения, расположенную за пультом управления.



## VII. Ежедневный уход

- (1) Поддерживайте чистоту массажного кресла. Защищайте его от пыли и повышенной влажности.
- (2) Если вы не используете кресло в течение длительного времени, пожалуйста, накройте его тканью.
- (3) Не устанавливайте массажное кресло под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой, поскольку таким образом обивка кресла быстрее поблекнет и износится.
- (4) Во время очистки кресла выключите кнопку питания и извлеките вилку из розетки.
- (5) Не используйте средства, содержащие растворители (такие как бензол), для очистки массажного кресла, поскольку это может привести к обесцвечиванию, износу и растрескиванию материала обивки.
- (6) В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить соответствующей запасной частью, полученной у производителя или в службе технического обслуживания.

## VIII. Технические характеристики

Название	массажное кресло	
Модель	VF-M58	
Номинальное напряжение	220 В	
Номинальная частота	50 Гц	
Номинальная мощность	80 Вт	
Номинальный сеанс работы	15min	
Класс безопасности	1 класс	
Стандарты	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008



# Гарантия

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за использование нашей продукции. Наша компания обеспечит вам следующие услуги на основе настоящей гарантии и чека в соответствии с соответствующими положениями Закона о защите прав потребителей:

1. Гарантийный срок на продукцию составляет один год (считается с даты выставления счета). В течение гарантийного срока при отсутствии с вашей стороны нарушений эксплуатации мы обеспечиваем бесплатный ремонт любых неисправностей, возникших из-за качества самого изделия.

2. На протяжении гарантийного срока при любом обращении в авторизованный производителем сервисный центр по поводу неисправности, вызванной качеством самого изделия, необходимо предъявить заполненный гарантийный талон и чек.

3. Любые изменения или фальсификация гарантийного талона или чека незамедлительно аннулируют гарантию.

4. Пожалуйста, храните гарантийный талон и чек в надежном месте во избежание их утери.

В следующих случаях гарантийное обслуживание не предоставляется:

А. Утеря гарантийного талона.

Б. Неисправность, вызванная ненадлежащей эксплуатацией изделия.

В. Вмешательство в изделие неавторизованного персонала.

Г. Неисправности или повреждения, вызванные передвижением или падением изделия.

Д. Повреждения, вызванные ненадлежащими хранением, уходом или условиями эксплуатации.

Е. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями.



Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» [www.victoryfit.ru](http://www.victoryfit.ru)

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» [www.victoryfit.ru](http://www.victoryfit.ru)

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.



Наименование товара: Кресло для различных видов массажа

Артикул: VF-M58

Производитель: Fuan Leercon Electronic Co., Ltd.

Адрес производителя: Китай, № 17 Dacheng Road, Qinxiyang Industry Zone, Fuan City, Fujian City, Fujian Province

Страна производства: Китай

Импортер: ООО «Сан Планет СПб»

Адрес Импортера: 191167, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Реки Монастырки, дом 5, литер В

Дата изготовления: 12/2019

Гарантийный срок: 12мес

Срок службы: 18мес

