

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica KIDS CS-9760-F, CS-9760-H

Благодарим Вас за приобретение зубной щетки
CS Medica KIDS CS-9760

ЕАС



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для проведения гигиены полости рта у детей от 3-х лет.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Предупреждение:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезной травме.

- Зубная щетка не является игрушкой и содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены ребенком. Храните ее в недоступном для детей месте.
- Вне зависимости от степени участия взрослых в процессе чистки зубов ребенка, данная процедура должна всегда проводиться под контролем взрослых.
- Рекомендованный возраст для пользования данной зубной щеткой – от 3-х лет.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеследующего:
 - чувствительные зубы или десны;
 - недавно перенесенная стоматологическая хирургическая операция;
 - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой.
- При выборе зубной пасты рекомендуется проконсультироваться со своим стоматологом. Детям не рекомендуется использование пасты с содержанием абразивных веществ.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.


Внимание:



Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Не используйте элементы питания, не указанные для данного устройства.
- Вставляйте элемент питания, соблюдая полярность.
- Извлеките элемент питания из зубной щетки, если Вы не собираетесь пользоваться ею в течение длительного времени (от трех и более месяцев).
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

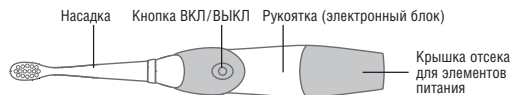

Дополнительно можно приобрести насадки CS Medica SP-760 для электрической звуковой зубной щетки CS-9760 (в комплекте 2 насадки).

3. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

- Звуковая частота для эффективной чистки (17 000 движений в минуту)
- Привлекательный дизайн со сказочными персонажами
- Умный таймер. Щетка оснащена 2-х минутным умным таймером, который делает паузу каждые 30 секунд, чтобы сориентировать пользователя на равномерную очистку каждого из четырех квадрантов ротовой полости, и отключает прибор по прошествии двух минут – времени, рекомендованного стоматологами для чистки зубов.
- Подсветка насадки. Подсветка насадки позволяет Вам следить за ходом чистки зубов Вашего ребенка и сделать эту процедуру увлекательной.
- Защита корпуса от попадания влаги IPX7
- 3 насадки в комплекте
- до 120 дней работы от одного элемента питания

4. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Снимите крышку отсека для элементов питания, руководствуясь схемой справа.



2. Закройте крышку отсека для элементов питания, руководствуясь схемой справа.

Примечание:

Если отсек для элемента питания закрыт неплотно, в корпус устройства может попасть вода и вызвать нарушения в работе зубной щетки.

- Срок службы элемента питания зависит от его модели, времени использования, силы, прилагаемой во время чистки, и иных факторов. Замените батарею, когда движения щетки станут более слабыми.
- Время работы от одной щелочной (щелочной) батареи составляет около 120 дней при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты. Так как прилагаемая батарея рассчитана для демонстрационных целей, она может проработать менее 120 дней.
- Рекомендуем использовать щелочные (щелочные) элементы питания типа AAA.

5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Установите насадку на рукоятку, совместив направляющие на насадке и рукоятке, и поверните ее по часовой стрелке до упора, как показано на рисунке.

Чтобы снять насадку, поверните ее против часовой стрелки и потяните от себя.



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого поместите щетку в ротовую полость.

Примечание:

Чтобы предотвратить разрывзвигание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.

2. Включите питание, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

Головка щетки начинает вибрировать. Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.

Правильная чистка зубов:



Поверхность зуба и окклюзионная поверхность: во время чистки держите щетину под углом 90° к поверхности зуба.

Граница между зубами и десной: во время чистки держите щетину под углом 45° к поверхности зуба.



Задняя сторона резов или область нервно расположенных зубов: вертикально прижимайте головку щетки к зубу и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения зубов.



3. Завершив чистку зубов, не вынимая щетку из рта, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить зубную щетку.

4. Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.

7. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Содержите зубную щетку в чистоте.
- Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком моющем средстве. Загрязненную поверхность также можно смочить водкой, а затем протереть тканью.
- Несмотря на то, что щетка является водонепроницаемой, не погружайте ее в воду на длительный период.
- Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может испортить нанесенную краску или привести к повреждению устройства.
- После каждого использования промывайте щетину водой.
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Храните щетку в недоступном для детей месте.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica KIDS
Модель	CS-9760-F, CS-9760-H
Потребляемая мощность	0,24 Вт
Источник питания	1 щелочной (щелочной) элемент питания типа AAA
Время работы от одного элемента питания	Около 120 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 мин)
Частота колебаний в минуту	17 000
Условия эксплуатации:	
температура	От 0 до 50 °С
относительная влажность	От 0 до 90%
Условия хранения и транспортирования:	
температура	От -10 до 50 °С
относительная влажность	От 10 до 50%
атмосферное давление	От 70 до 106 кПа
Масса	31 г
Габаритные размеры	164 x 25 x 25 мм
Срок службы	Рукоятка (электронный блок) – 2 года, насадка – 3 месяца, элементы питания – устанавливаются производителем этих элементов.
Комплект поставки	Рукоятка (электронный блок) с насадкой, 2 дополнительных насадки, щелочной элемент питания типа AAA, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

ЕАС

Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза

IPXX

Степень защиты корпуса зубной щетки от проникновения твердых предметов и воды



Обратитесь к руководству по эксплуатации



Температурный диапазон / Диапазон влажности / Ограничение атмосферного давления



Знак соответствия Директиве ЕС



Возможности утилизации использованной упаковки. XX – цифровое обозначение материала упаковки. YYY – буквенное обозначение материала упаковки
12 Полиэтилентерефталат
21 Полиэтилентерефталат
PAP Бумага

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который расположен на упаковке прибора и имеет структуру YYMMNNNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNNN – порядковый номер изделия, а также в ЛОТ номере, который расположен в отсеке для элементов питания и имеет структуру YYMMNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNN – номер партии.

10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если зубная щетка перестала работать, возможно, батарейка разрядилась. В случае если даже после замены батарейки зубная щетка не работает, не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. Обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания (адреса центров технического обслуживания указаны в конце данного руководства).

Проблема	Возможная причина	Способ решения
Зубная щетка не включается.	Элемент питания исчерпал свой ресурс.	Установите новый элемент питания (см. п. 4).
Колебания щетины отсутствуют, слишком медленные и слабые.	Вы слишком сильно прижимаете щетину к поверхности зубов.	Во время чистки слегка касайтесь щетиной поверхности зубов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сроки гарантии: **рукоятка (электронный блок) – 2 года**
насадка – 3 месяца

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи «_____» _____ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

С условием гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.

Подпись покупателя _____

Дата обращения «_____» _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю «_____» _____ г.

Подпись и штамп мастера _____

Работу принял _____
(подпись клиента)



Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отнесите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

11. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Свидетельство о государственной регистрации № КГ.11.01.09.014.R.002710.06.21 от 14.06.2021. Срок действия до 14.06.2026.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.78899/21 от 06.07.2021. Срок действия до 22.06.2026.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.08799/21 от 16.07.2021. Срок действия до 15.07.2026.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



127006, Москва

Ворлотиковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9
Тел: (495) 363-16-52 • **E-mail:** csinfo@csmedica.ru • **www.csmedica.ru, сисмедика.рф**
Часы работы: пн–пт: с 9:30 до 18:00 (без перерыва на обед), сб, вс и праздничные дни – выходной

Центр технического обслуживания в Москве: ООО «СисМедика ТехЭксперт»
127006, Москва, Ворлотиковский пер., д. 7, стр. 3, комната 14 (м. «Маяковская»)
Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный) • **E-mail:** cstechexpert@mail.ru
www.cstechexpert.ru

Часы работы Центра технического обслуживания в Москве:
пн–пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед),
сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед), вс и праздничные дни – выходной

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

Производитель:
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD (НИНБО СИГОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)
No.239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China.
(№ 239 Цзяньгу Родд, Зон С Гонтанг Индустриал Парк, Цзяньби Дистрикт, Нинбо, Китай)
Сделано в Китае

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ CS MEDICA В РОССИИ

- Арзамас, ООО «СисМедика Поволжье», ул. Жукковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СисМедика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_medica@mail.ru
- Армавирский, ООО «СисМедика Поморье», ул. Суворова, д. 2, оф. 7, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СисМедика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, корп.5 тел.: (8512) 38-20-78, csmedica30@mail.ru
- Баянгол, ООО «СисМедика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-batnalt@mail.ru
- Белгород, ООО «СисМедика Белгород», ул. Архирейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, cs-belmed@mail.ru
- Благовещенск, ООО «СисМедика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинин д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-29, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СисМедика Иркутск», ул. Мира, д. 411, тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СисМедика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-byruansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СисМедика Северо-Запад», ул. Мерещкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, povogorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СисМедика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-31, 37-00-32, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СисМедика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СисМедика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф.24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Волгодонск, ООО «СисМедика Волгодонск», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica@volgodon.ru
- Воронеж, ООО «СисМедика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, (473) 255-08-71, (910) 732-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, ООО «СисМедика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, region66@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru
- Иваново, ООО «СисМедика Ярославль», ул. Степанова, дом 5, оф. 105, (4932) 25-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СисМедика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СисМедика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-69-74, (3952) 48-69-65, office38@csmedica.ru
- Иошкар-Ола, ООО «СисМедика Чоьоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@marl-el.ru
- Казань, ООО «СисМедика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn@mail.ru
- Калининград, ООО «СисМедика Калининград», ул. Наревская, д. 49е, оф. 206, тел.: (4012) 95-38-65, 8 (963) 737-79-94, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СисМедика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 935-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СисМедика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kermego@csmedica.ru
- Киров, ООО «СисМедика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, корп. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru
- Кострома, ООО «СисМедика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, оф. 7, тел.: (4942) 83-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru
- Краснодар, ООО «СисМедика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, otpon@kubannet.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СисМедика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-38, info@csmedicansen.ru
- Курск, ООО «СисМедика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СисМедика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru

- Магнитогорск, ООО «СисМедика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, pln@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СисМедика Махачкала», ул. Богатырева, д. 11а, корп. 119, подъезд № 5, тел.: (928) 941-00-20, director5@csmedica.ru
- Минеральные Воды, ООО «СисМедика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedica@mail.ru
- Мурманск, ООО «СисМедика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murmans@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СисМедика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СисМедика Тюмень», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моф.: (902) 970-37-23, nvk@csmedica.ru
- Нижний Новгород, ООО «СисМедика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СисМедика Кемерово», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (923) 464-05-18 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, ООО «СисМедика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СисМедика Омск», ул. Декбристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedica_omsk@mail.ru
- Орёл, ООО «СисМедика Орел», ул. Московская, д. 80, тел.: (4862) 54-24-00, oreil@csmedica.ru
- Орэнбург, ООО «СисМедика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СисМедика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (49950) 843-28, sprobmosk@mail.ru
- Пenza, ООО «СисМедика Пенза», ул. Калинин д. 89, тел.: (8412) 56-18-32, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СисМедика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СисМедика Карелия», ул. Маршала Мерещкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-74, karalia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СисМедика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Россошь, ООО «СисМедика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СисМедика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85, (863) 231-03-86, (863) 231-04-85, (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СисМедика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ruzan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СисМедика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 405, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, samara@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 406, тел.: (846) 254-14-19, csmedica-samara@samara.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СисМедика Северо-Запад», Малодетскийский пр-т, д. 36, тел.: (812) 467-46-26, csnp@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетскийский пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 409-40-30, srbpservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СисМедика Саранск», ул. Баткино, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 27-03-31, csmedica@zaransk.ru
- Саратов, ООО «СисМедика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, saratov@csmedica.ru
- Саров, ООО «СисМедика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz_cs1@nkr.ru, arz_cs2@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жилыцовой, д. 4, пом.2, тел.: (978) 137-90-68, (978)137-90-68, director2@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СисМедика Смоленск», ул. 2-я Линия Красноармейской Слободы, д. 5, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СисМедика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasochi@mail.ru
- Старополь, ООО «СисМедика Старополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, оф. 3 тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicativ@mail.ru
- Сургут, ООО «СисМедика Тюмень», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №3, тел.: (3462) 25-46-17, (922) 074-32-72 surgut@csmedica.ru
- Тамбов, ООО «СисМедика Тамбов», ул. Орехова, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СисМедика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tvr@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СисМедика Самара», б-р Гаа, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, tl@csmedica.ru
- Томск, ООО «СисМедика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СисМедика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tuia@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СисМедика Тюмень», ул. Амурская, д.4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70, (919) 944-10-11, cstumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СисМедика Иркутск», ул. Терешковой д. 26, пом. 23, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СисМедика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica_ulyanovsk@yandex.ru
- Уфа, ООО «СисМедика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом. 21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СисМедика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Владивостокская, д.16, оф.116, тел.: (4212) 70-12-65, csmedica_hab@mail.ru
- Чеховскы, ООО «СисМедика Чеховскы», ул. Зингельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 68-24-08, 67-43-31, csm-ch@marl-el.ru
- Челябинск, ООО «СисМедика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СисМедика Вологда», пр-т Плуняцкого, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, моф.: (921)834-78-65, csmedicacherpovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СисМедика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чкалова, д. 124, оф. 116, тел.: (9022) 21-06-05, 8 (914) 368-56-05, csmedica-chita@mail.ru
- Шакты, ООО «СисМедика Ростов-на-Дону», ул. Моисея, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СисМедика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4720) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 cs-yar76@yandex.ru



https://tm.by
Интернет-магазин